




TriGO<sup>o</sup>



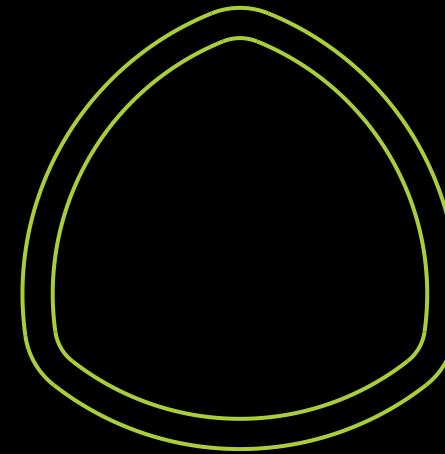

## **Защо триъгълни тръби?**

Нашите екипи за изследователска и развойна дейност усъвършенстваха триъгълните тръби, които формират основата на Вашия **Trigo**.

Освен че придават на Вашия инвалиден стол модерен и уникален вид, те имат предимството да направят вашия Trigo по-лек, като същевременно поддържат оптимална якост.

# TRIGO S



Нашият инвалиден стол се предлага в две версии. Първата е **Trigo S**, активен и сгъваем стол с интегрирани поставки за краката в рамата. Дизайнът на Trigo S е активен и спортен. Тази конфигурация прави инвалидния стол още по-лек, като запазва максималната якост.





# TRIGO T



Има и втори модел, **Trigo T**.  
Този инвалиден стол е конструиран със същия модерен външен вид. Сгъваемата рама е с прибиращи се и снемачи се поставки за краката. Неговият дизайн прави този модел идеален за лесно транспортиране.

## ДИЗАЙН

**VERMEIREN** проектира **Trigo** като ултрамодерен инвалиден стол, подходящ за всеки вкус. Поради това Вашият Trigo може да бъде напълно персонализиран при поръчката; от рамата до колелата, включително подлакътниците и спектър от повече от 30 възможни цвята. Накратко, има почти толкова на брой различни инвалидни столове Trigo, колкото са потребителите!





## БЕЗКРАЙНО РЕГУЛИРУЕМ

Освен конфигурацията избрана при поръчката (размер, тип на облегалката, подлакътници, рама, опции,...)

Вашият **Trigo** остава динамичен стол. При всеки стол могат да бъдат извършени голям брой регулировки, като страничен наклон на колелата, височина на седалката,...



## РЕГУЛИРУЕМ СТРАНИЧЕН НАКЛОН НА КОЛЕЛАТА ЗА ВСЕКИ ИНВАЛИДЕН СТОЛ

Благодарение на гениална система, страничният наклон на колелата на Вашия **Trigo** може да бъде променен директно от Вашия стол! Страничният наклон може да бъде променен до желаната позиция от 0°, 2°, 4° или 6° (в зависимост от конфигурацията). Вашият Trigo ще бъде доставен със страничния наклон избран при поръчката.







## ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА

За да се адаптира **Trigo** към потребителя и да се направи повече или по-малко „активен“, позицията на задните колела може да бъде регулирана директно върху рамата на Вашия инвалиден стол.

Задните колела могат да бъдат регулирани напред или назад в 8 различни позиции. Вашият Trigo се доставя с неговите колела в позицията зададена при поръчката.



## НАКЛОН НА ОБЛЕГАЛКАТА

Има 3 възможни облегалки за **Trigo**: фиксирана облегалка, наклоняща се облегалка и наклоняща се и сгъваема облегалка. За втората и третата опции наклонът на облегалката може лесно да бъде регулиран върху рамата на стола.




## ПРЕДЛАГА СЕ В РАЗМЕРИ ЗА ДЕЦА

Инвалидният стол **Trigo** е проектиран по такъв начин, че е подходящ за възрастни, както и за деца. Поради тази причина Trigo се предлага в ширини от 30 cm до 50 cm. Даже за по-малките размери се предлага широко разнообразие от аксесоари и опции.




# ОПЦИИ

## РЪКОХВАТКИ ЗА БУТАНЕ

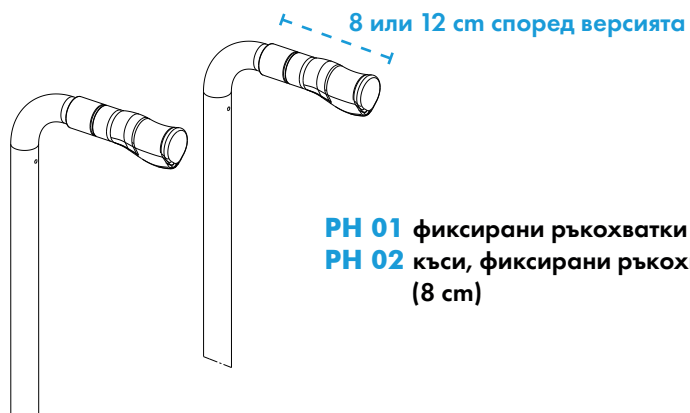


**PH 01** фиксирани ръкохватки за бутане (12 cm)


**PH 02** къси, фиксирани ръкохватки за бутане (8 cm)

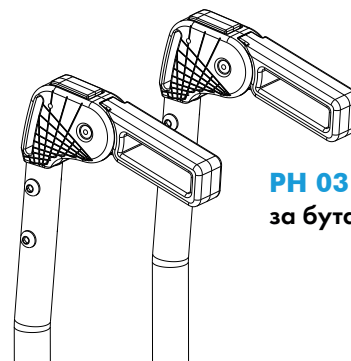


**PH 03** фиксирани, сгъваеми ръкохватки за бутане

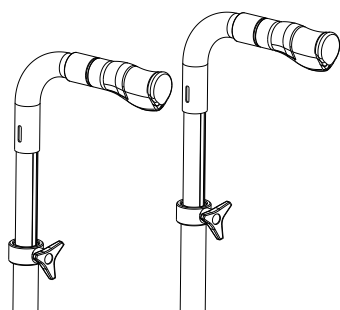

**PH 04** Регулируеми по височина ръкохватки за бутане (в тръбите на облегалката)

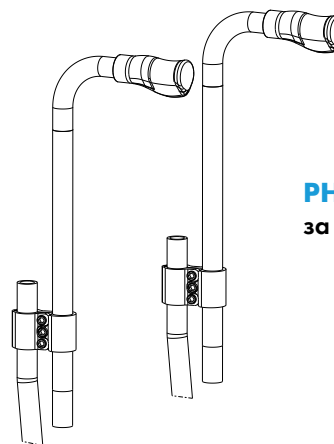

**PH 05** Регулируеми по височина ръкохватки за бутане (зад тръбите на облегалката)

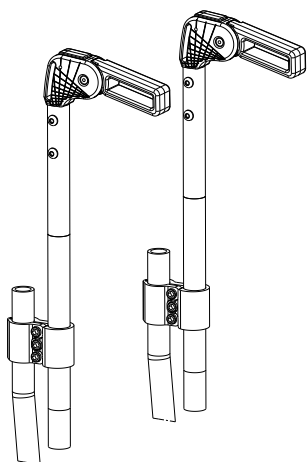


**PH 06** Сгъваеми и регулируеми по височина ръкохватки за бутане (зад тръбите на облегалката)

Ръкохватките за бутане **PH 03** и **PH 06** са напълно сгъваеми.




# ОПЦИИ

## ПОДЛАКЪТНИЦИ И ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ОБЛЕКЛО

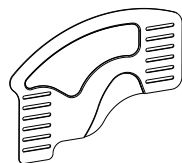


### **B82-S от B82-C ФИКСИРАНИ**

Фиксирани, регулируеми предпазители за облекло, от алуминий или въглеродни влакна

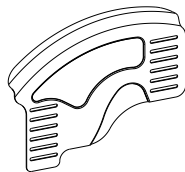


### **B82 ФИКСИРАНИ**

Фиксирани, регулируеми предпазители за облекло, от алуминий с калник

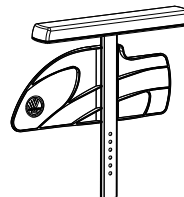


### **Vi5**

Регулируеми по височина подлакътници

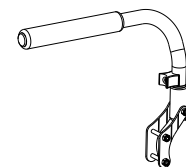


### **TUBE**

Подлакътници, прибиращи се назад (само с фиксирана облегалка)

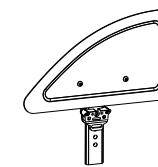


### **B82S-A**

Снемачи се и регулируеми предпазители за облекло, от алуминий

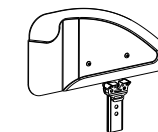


### **B82SL-A**

Дълъг, снемач се подлакътник, от алуминий

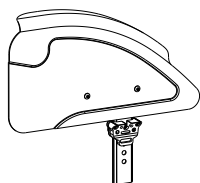


### **B82L-A**

Дълги, снемачи се и регулируеми предпазители за облекло с калник, от алуминий

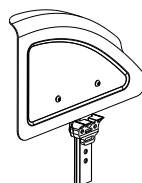


### **B82-A**

Снемачи се и регулируеми предпазители за облекло с калник, от алуминий

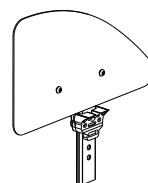

### **B82S-C**


Снемачи се и регулируеми предпазители за облекло, от въглеродни влакна

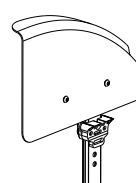


### **B82-C**

Дълги, снемачи се и регулируеми предпазители за облекло с калник, от въглеродни влакна


На разположение под ъгъл от 70°, 80° и 90°

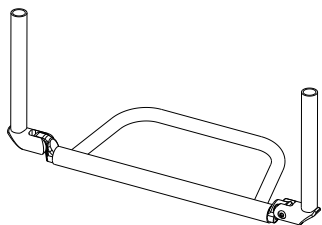


Моноблокова тръба от алуминий

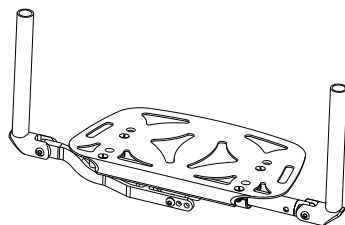


Моноблокова, поставка за крака от алуминий, съгъваема

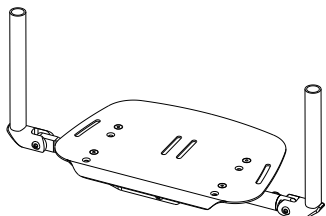


Моноблокова, поставка за крака от въглеродни влакна, съгъваема

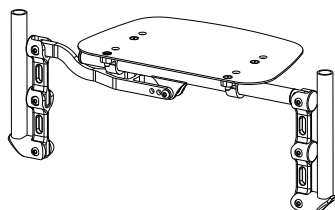

Моноблокова, с по-висока поставка за крака

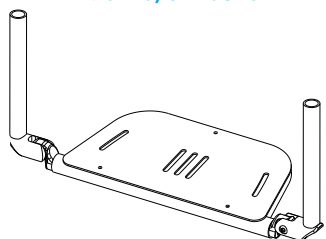

Моноблокова, със съгъваема поставка за крака

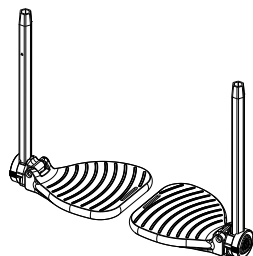


Отделни поставки за крака




**S** TRIGO S

# ОПЦИИ


## ПОСТАВКИ ЗА КРАКАТА

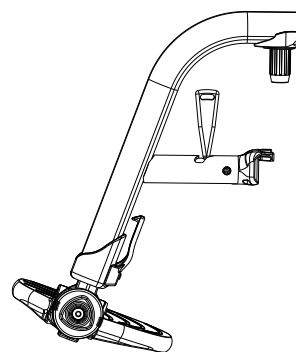


70°

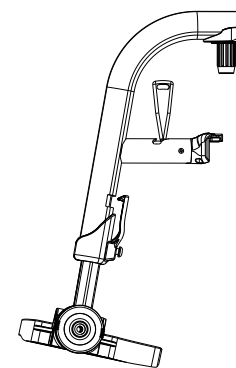

80°

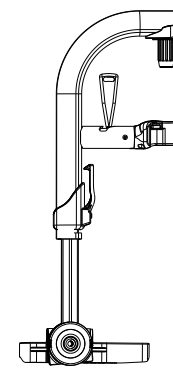

90°

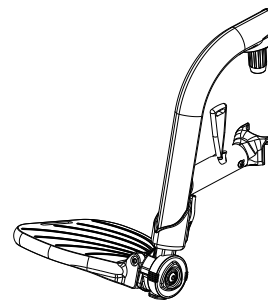

ВА6 - поставки за крака, скъсени с 5 см



**T** TRIGO T

# ОПЦИИ

## КОЛЕЛА

### Предни колела



Стандартни черни  
3", 4", 5", 6"



Прозрачни  
3", 4", 5", 6"



Алуминиеви сребристи  
3", 4", 5"



Алуминиеви сини  
3", 4", 5"



Алуминиеви червени  
3", 4", 5"



От въглеродни влакна  
4", 5"



Светодиод  
4", 5"

### Задни колела



Стандартни колела  
18"-инчови



Колела Design  
20", 22", 24", 26"



Колела Spirit алуминиеви  
24"



Колела Spirit червени  
24"



Колела Spirit сини  
24"



Колела за пресечен терен  
24"



Черни гуми Right run  
предлагат се с колела  
Design и Spirit



Гуми Marathon plus  
предлагат се с колела  
Design и Spirit

# ОПЦИИ


## СПИРАЧКИ



Спирачки за натискане или издърпване




Спортни спирачки

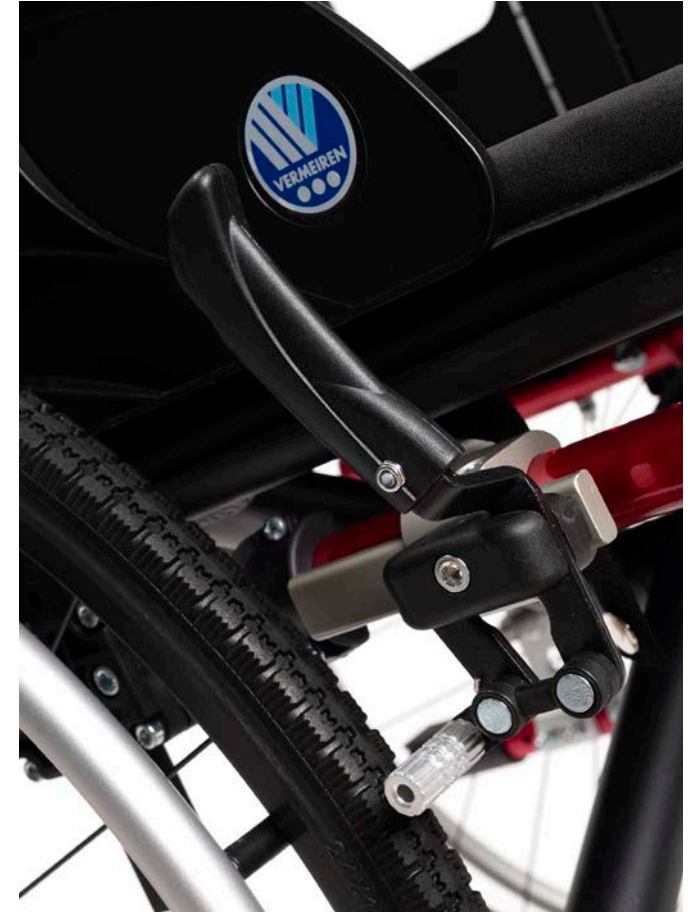


Традиционни спирачки с  
прибиращи се ръкохватки (B40)

# ОПЦИИ


## Опции и аксесоари

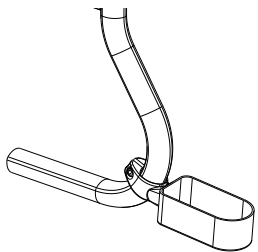


**Държач за патерици,  
ляв или десен**  
B31L или B31R

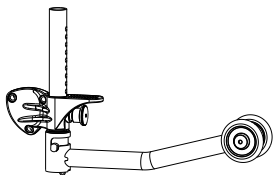

**Колело против накланяне  
ляво или дясно**  
B78L или B78R

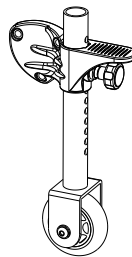


**Пътни колела**  
B86

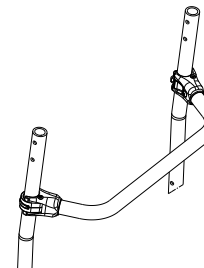


**Стабилизиращ профил  
за облегалка**  
B90




**Колани Neoflex**  
Консултирайте се за всички  
възможни решения на нашия  
уебсайт [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

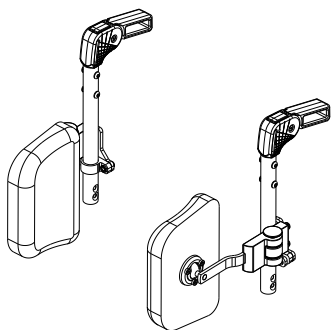

**Странични опори лява или  
дясна (голям размер)**  
L04 L или L04 R

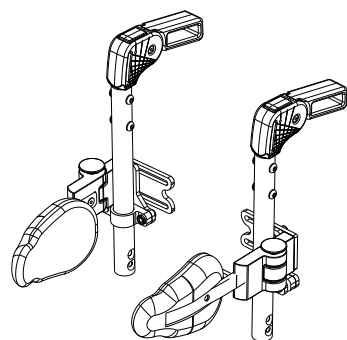

**Странични опори лява или  
дясна (малък размер)**  
L04S L или L04S R

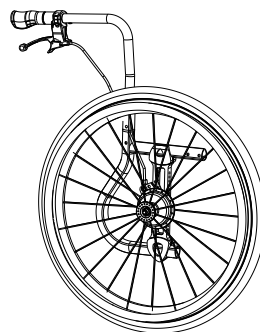

**Барабанна спирачка**  
24" x 1 3/8"  
сиви колела

**Предпазители за спици**  
Консултирайте се за всички  
възможни модели на нашия  
уебсайт [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

Още опции и аксесоари в нашия формуляр за поръчка



# МНОГОБРОЙНИ ОПЦИИ ЗА ЦВЕТА!



**C4M - Ярко червено матово**  
**C4G - Ярко червено гланцирано**



**C5M - Черно матово**  
**C5G - Черно гланцирано**



**C8M - Жълто матово**  
**C8G - Жълто гланцирано**



**C29M - Ярко сиво матово**  
**C29G - Ярко сиво гланцирано**




**C53M - Оранжево матово**  
**C53G - Оранжево гланцирано**



**C55M - Инокс матово**  
**C55G - Инокс гланцирано**



**C56M - Синьо-сиво матово**  
**C56G - Синьо-сиво гланцирано**

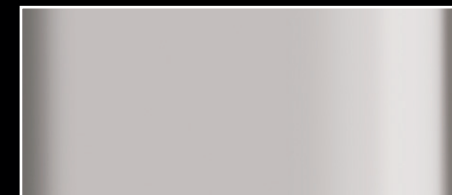

**C59M - Цвят шампанско матово**  
**C59G - Цвят шампанско гланцирано**



**C71G - Металик**  
**тъмносиньо**



**C72G - Металик**  
**вишнево червено**



**C73G - Металик**  
**ярко зелено**



**C76M - Металик бяло матово**  
**C76G - Металик бяло гланцирано**



**C78G - Меко синьо**  
**гланцирано**



**C79M - Металик ярко синьо матово**  
**C79G - Металик ярко синьо гланцирано**



**C85M - Зелено матово**  
**C85G - Зелено гланцирано**



**C87M - Ярко оранжево матово**  
**C87G - Ярко оранжево гланцирано**



**C88M - Златисто матово**  
**C88G - Златисто гланцирано**



**C89M - Медно матово**  
**C89G - Медно гланцирано**



**И десетки други цветове**  
**по Ваше желание.**  
(С допълване)

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Ширина на седалката : **300 до 500 mm** (с нарастване от 20 mm)

Обща ширина (страничен наклон 0°) : **460 до 660 m**

Дълбочина на седалката : **300 до 500 mm** (с нарастване от 20 mm)

Височина на седалката : **380 до 510 mm** (според конфигурацията)

Общо тегло : **започващо от 10 kg** (според конфигурацията)

Максимално тегло на потребителя : **70 или 130 kg** (конфигурацията)

Възможност за сгъваема облегалка : **да**

Височина на облегалката : **250 до 510 mm** (според конфигурацията)

Размери на предните колела : **3", 4", 5", 6"**

Размери на задните колела : **18", 20", 22", 24", 26"**

Страничен наклон на колелата : **0° до 6°** (директно регулируем от стола)

Предлагана тапицерия : **Nylon, Cordura, AirFlow**

Размери в mm, тегло в kg. Допуск на размерите: 15 mm, 1,5 kg, 1,5°

# ЗАБЕЛЕЖКИ

## VERMEIREN

### VERMEIREN GROUP N.V.

Vermeirenplein 1-15  
2920 Kalmthout  
Белгия

Tel : +32 (0)3 620 20 20  
Fax : +32 (0)3 666 48 94  
@ : info@vermeiren.bg

[www.vermeiren.bg](http://www.vermeiren.bg)

Всички права запазени, включително превод. • Някоя част от това ръководство не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма (печат, фотокопие, микрофилм или друг процес) без писмено разрешение на издателя, или обработена, дублирана или разпространена чрез използване на електронни системи.

Издание: март 2020 г.

Изображенията са само за илюстративни цели. Някои функции може да са по избор. Предмет на технически промени.  
Посетете нашия уебсайт за най-актуална информация :  
[www.vermeiren.bg](http://www.vermeiren.bg)

За допълнителна информация се  
свържете със своя търговец.

TriGO<sup>o</sup>